

培地シャーレ塗抹装置

塗抹ミス防止機能

Hi-Speed Printing System

MPS-300R


- 培地シャーレへの画線塗抹を自動化
- 分画位置検知機能により、分画シャーレへの塗抹に対応（2分割）
- 培地への検体棒接触センサーが確実な塗抹を実現



MPS-300R

培地シャーレ塗抹装置

- 分画位置検知センサーにより、分画シャーレへの塗抹に対応（2分割）
- 平板、分画（2分割）培地への多彩な塗抹モードを搭載
- 検体棒の培地への接触をセンサーで検知、空振りを防止します
- 検体 ID バーコードリーダー搭載
- インクジェットプリンターにより、各種文字情報や ID、各種コードをシャーレにプリント可能（オプション）
- 運転ログのファイル出力機能

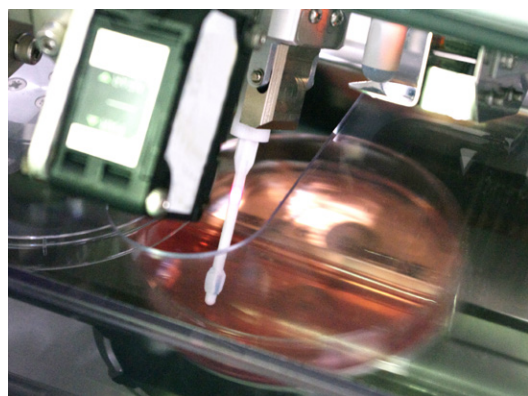

仕様

外形寸法	W1,300×D900×H1,750mm（パトライト除く）
重量	約 300kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	450W
外部通信	USB 1ポート
検体架設数	最大 200 検体
シャーレ架設数	【供給 / 収納共に】50 枚収納スタッカー ×4（最大 200 枚）※随時追加 / 取り出し可能
処理能力	250 枚 / H
滅菌設備	UV 蛍光灯

臨床検査・理化学機器 業務システム 開発・製造・販売
メディカテック株式会社

本社・工場 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目11-28
Tel: 048-997-2305 Fax: 048-996-6968

東京営業所 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬1丁目11-8
Tel: 048-994-3450 Fax: 048-994-3452

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-24
新大阪11山よしビル 7F
Tel: 06-6195-1207 Fax: 06-6195-1208

WebHP <http://www.medicattec.co.jp/>



ISO 9001 12QR-1646
ISO 13485 12MR-007