

自動カップセット機

Automatic Cup Insert Machine

ACI-1600

50ラック(250カップ)を約8分で処理

高速処理機能



各メーカーのカップ、ラックに対応

5chバリスパン式ヘッドの採用


● 省力化に貢献

● 高速処理を実現

● 大容量ホッパーを搭載

自動カップセット機

Automatic Cup Insert Machine ACI-1600

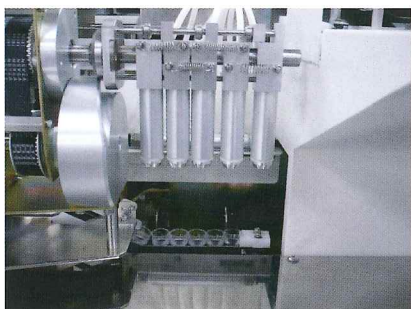


カップ装着部



カップ供給部


- 面倒なカップセットを自動化します。
- 5chバリスパン式ヘッド採用により高速化を実現。50ラック(250カップ)を約8分で処理します。
- お客様ご使用のカップ、ラックに対応したカップセット機の製作も可能です。

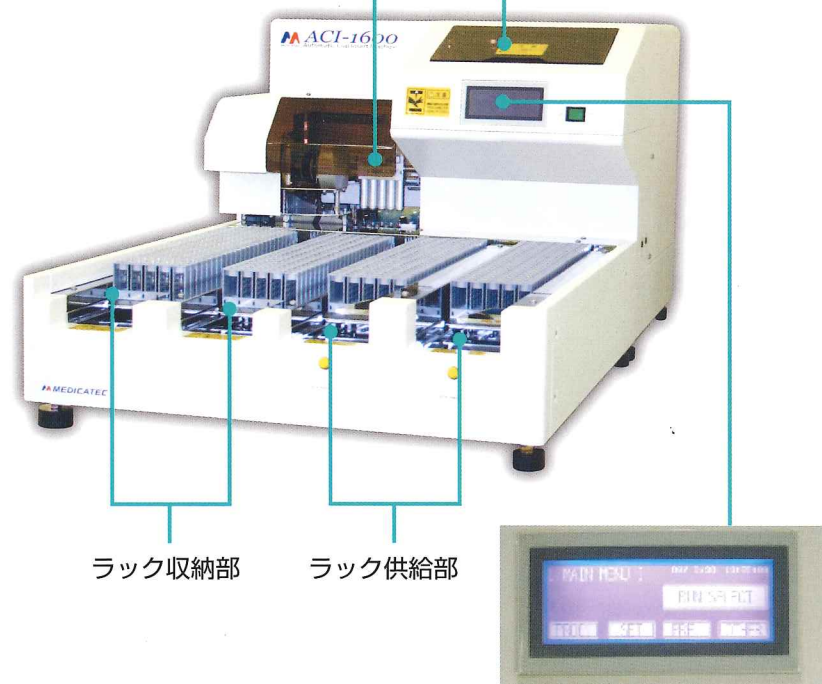

ラック収納部

ラック供給部

操作パネル部

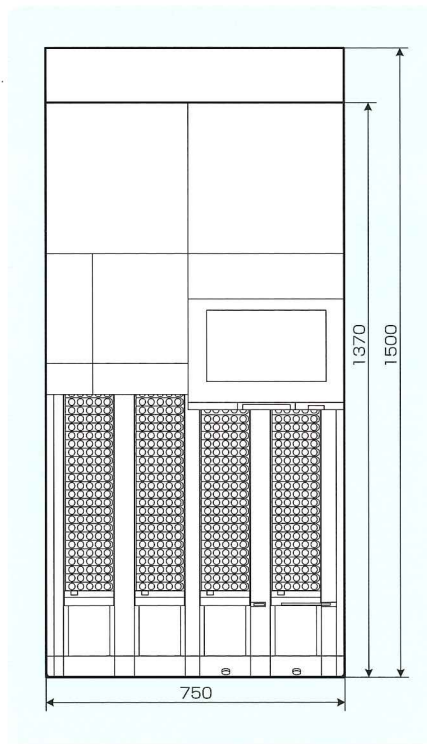

◆ 構成・性能

使用カップ	日立カップ
ホッパー部	2000カップ収納可能
処理能力	1600カップ以上/時間
搬送部	25ラック×2トレイ (アロカ製トレイ)随時追加可能
装填ミス率	1カップ以下/1,800カップ
制御部	16ビットCPU(メディカテック社製基板)

◆ 仕様

品名	自動カップセット機
形式	ACI-1600
重量	約180kg(ラック搬送部約80kg)
電源	AC100V 50/60Hz, 約300VA(本体)
寸法	本体: W750mm×D1360mm×H600mm
運転音	約65dB(カバークローズ時)

■本仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。



臨床検査・理化学機器 開発・製造・販売

メディカテック株式会社

<http://www.medicattec.co.jp/>

本社・工場 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目11-28 ☎048(997)2305(代) FAX.048(996)6968
 営業所 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬863-1 ☎048(994)3450 FAX.048(994)3452
 サービスセンター 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目12-13 ☎048(997)2348

ISO 9001
ISO 13485 認証取得



取扱販売店