

# 全自動プレート洗浄機

## ● 省力化に貢献

洗浄から乾燥まで自動処理。  
洗浄工程が任意に設定可能。

## ● 高速処理を実現

1度に51枚のプレートが洗浄可能。  
プレートに合わせた適正な温度で効率的に乾燥。




 **MW-51II**  
MEDICATEC *Auto Plate Washer*

# MW-51-II Auto Plate Washer

- 一度の運転で51枚のプレートを洗浄から乾燥まで自動処理、省力化に貢献します。
- 最大で51枚のプレートを約13分強で洗浄します。(洗浄のみ)

## 洗 浄 工 程

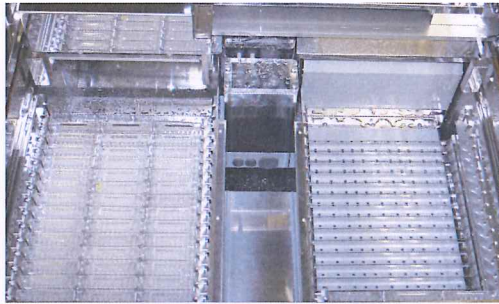

プレート供給・収納部



操作パネル部

水道水噴射洗浄



脱塩水噴射洗浄



エアブロー脱水



温風乾燥

## ◆ 仕 様

品 名	全自動マイクロプレート洗浄機
型 式	MW-51-II
筐 体	フレーム・板金焼付け塗装 ケース他・ステンレス防錆仕様
重 量	約 215 kg
電 源	AC100V 50/60Hz, 約 1500VA(本体)
寸 法	W1120×D750×H1050 (表示灯含まず)

## ◆ 構 成 ・ 性 能

プレート供給部	120穴マイクロプレート 最大17ラックセット可能 (計51枚) 1ラックに3枚プレートセット可能	設 定 項 目	水道水洗浄回数 0~9回 脱塩水洗浄回数 0~9回 エアブロー回数 0~9回 乾燥時間 0~180min ラック送り速度 9.5~57mm/sec
プレート収納部	120穴マイクロプレート 最大17ラック収納可能 (計51枚) 1ラックに3枚プレートセット可能	乾 燥 温 度	常温~60℃
処 理 能 力	標準洗浄パターンで1バッチ (51枚) 洗浄時間、乾燥時間を含めて約3時間 処理能力はシーケンスにより変わります。	エ ア ブ ロ ー	ブロアーによる送風水切り方式
水道水使用量	洗浄通水時で約1.5~2.5L/min	操 作 部	液晶タッチパネル (2色/日本語表示) スイッチボタンにて操作
脱塩水使用量	洗浄通水時で約1.5~2.5L/min	外 部 通 信	RS232C 1CH
排 水	最大排水能力 約30L/min 高所 (約1m程度) への排水可能	制 御 部	16ビット CPU (MT製基板)
		対 応 プ レ ー ト	120穴、96穴マイクロプレート (発注時指定)

■ 本仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

臨床検査・理化学機器 開発・製造・販売  

**メディカテック株式会社**  
<http://www.medicattec.co.jp/>



本社・工場 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目11-28  
 TEL 048 (997) 2305 代 FAX 048 (996) 6968  
 東京営業所 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬1丁目11-8  
 TEL 048 (994) 3450 FAX 048 (994) 3452  
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目11-24  
 新大阪11山よしビル7階  
 TEL 06 (6195) 1207 FAX 06 (6195) 1208  
 サービスセンター TEL 048 (996) 7880