

# 採血管自動開栓機

Auto TubeCap Opener

MCO-75S

MCO-100A

コンパクト設計

328 (W) × 335 (D) × 557 (H)

採血管のゴムキャップを  
10本まとめて自動開栓  
クロスコンタミ防止設計

● 清潔な作業環境

● 開栓部の洗浄が可能


● 簡単操作




# 採血管自動開栓機

# Auto TubeCap Opener MCO-75S/MCO-100A

- 開栓後のキャップは、直接収納袋に落下するため、直接触れる必要はありません。
- 開栓爪・セパレーター・シューターは容易に脱着・洗浄が可能で、常時清潔な環境での作業が可能です。
- 電源を入れたら、ラックをセットしてスタートボタンを押すだけ！  
誰でも簡単にコンタミの心配なく開栓ができます。
- コンパクト設計 328(W)×335(D)×557(H)
- お客様ご利用の検体チューブ・ラックに対応した開栓機の製作も可能です。

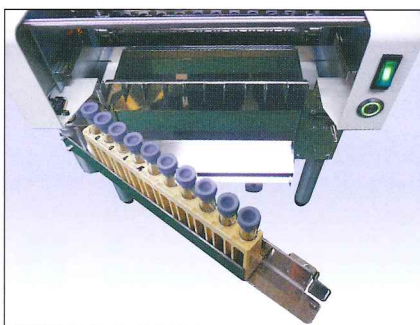

ラックレール 解放時

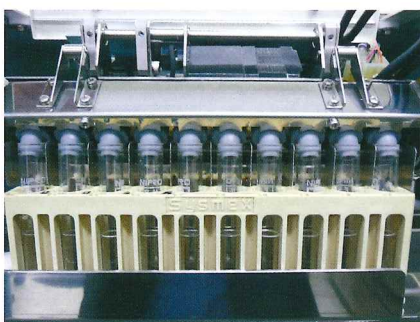

開栓時



足(オプション)取り付け例



MCO-100A

MCO-75S は Sysmex 社ラックに、  
MCO-100A はアロカ社ラックに対応しています。

## ◆仕様

品名	採血管自動開栓機
形式	MCO-75S/MCO-100A
重量	約14kg
電源	AC100V 50/60Hz, 36W
寸法	W328mm×D335mm×H557mm
開栓爪	着脱交換可能タイプ(洗浄可能) *指定ラック及びチューブ毎の専用品となります。 *ゴム栓専用となります。
セパレーター	着脱交換可能タイプ(洗浄可能)
シューター	着脱交換可能タイプ(洗浄可能)

■本仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。



臨床検査・理化学機器 開発・製造・販売

**メディカテック株式会社**

<http://www.medicattec.co.jp/>

本社・工場 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目11-28 ☎048(997)2305(代) FAX.048(996)6968  
営業所 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬863-1 ☎048(994)3450 FAX.048(994)3452  
サービスセンター 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目12-13 ☎048(997)2348

ISO 9001  
ISO 13485 認証取得



取扱販売店